

SAHOMA®-II INHALATIONSSET FÜR PFERDE

Das SaHoMa®-II Inhalationsset für Pferde ist ein **mobiles, akku-betriebenes Inhalationsgerät**, das Flüssigkeiten (NaCl, Sole, Medikamente, etc.) mithilfe der **innovativen Mesh-Technologie** in Aerosole umwandelt, die bis in die tiefstgelegenen Atemwege Ihres Pferdes gelangen.

Dank der **leichten und transparenten Bauweise ohne Schläuche, Kammern und Rohre** wird das Aerosol direkt vor den Nüstern des Pferdes produziert. Kleinste Aerosolpartikel erreichen von dort **ohne Umwege oder Kondensverluste** geradewegs ihren Bestimmungsort.

Die **robuste, bruchfeste Inhalationsmaske** wird für optimalen Tragekomfort und individuelle Anpassung durch einen weichen Dichtring ergänzt. Gemeinsam mit der bei Inhalatoren für Pferde einzigartigen Filtermembran, die Ihrem Pferd eine **angenehme Atmung fast ohne Widerstand** ermöglicht, entsteht ein nahezu geschlossenes System, das eine effektive **Inhalationstherapie für Ihr Pferd garantiert**.

NEBU-TEC: Innovative Inhalationssysteme für Mensch und Tier

NEBU-TEC ist ein führendes, international tätiges Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Elsenfeld (Deutschland). Wir entwickeln, produzieren und vertreiben mit rund 40 engagierten Mitarbeitenden moderne Inhalationssysteme auf Basis fortschrittlicher Mesh-Technologie. Die Inhalationssysteme finden Anwendung in der Human- und Veterinärmedizin. Die Produktion erfolgt zu 95 % in Deutschland - somit steht **NEBU-TEC** für höchste Qualität und Zuverlässigkeit.

NEBU-TEC gilt als Pionier in der Veterinärmedizin und bietet spezialisierte Inhalationssysteme für die Behandlung von Pferden, Kleintieren wie Hunden und Katzen sowie Falken an.

KONTAKT

Sie möchten Ihr Pferd effektiv unterstützen? Kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-Mail – **wir beraten Sie gerne:**



NEBU-TEC International med. Produkte Eike Kern GmbH

Kreuzfeldring 17 | D - 63820 Elsenfeld

+49 (0) 6022 - 610 62 -0 | info@nebu-tec.de

www.nebu-tec.de

**Besuchen Sie uns auch auf
unseren Social-Media-Kanälen:**



NTI_HM-200_Produktfolder-DE_B | 01.12.2024



EINSATZ & VERWENDUNG DER INHALATION

Atemwegserkrankungen gehören mit zu den **häufigsten inneren Erkrankungen** bei Pferden. Das gesamte Immunsystem des Pferdes ist auf ein **Leben in freier Natur** ausgerichtet. Gerade im Winter reagieren unsere sensiblen Pferde durch die unnatürlichen Haltungsbedingungen in warmen, schlecht belüfteten und staubigen Ställen schnell mit **Atemwegsproblemen**. Haltungsmängel leisten unter Umständen Virusinfektionen Vorschub, diese wiederum erleichtern eine Empfindlichkeit des Pferdes gegenüber Staub und Pilzsporen. Daraus kann in der Folge eine **chronische Erkrankung** resultieren.

Die **Inhalationstherapie** ist für Pferde mit Atemwegserkrankungen die erste Wahl und wird daher für **folgende Anwendungsgebiete** erfolgreich eingesetzt:

- Einsatz zur **Behandlung und Prävention von entzündlichen und chronischen Atemwegserkrankungen** bei Pferden (Equinem Asthma, Inflammatory Airway Disease (IAD) und Recurrent Airway Obstruction (RAO), etc.)
- Unterstützung des Atmungsapparates durch **Befeuchtung und Pflege** mittels salzhaltiger Inhalationslösungen (wie z. B. Kochsalzlösung, Totes-Meer-Sole, etc.)
- **Inhalative Verabreichung** gering dosierter Medikamente, die über die Atmung **direkt an ihren Bestimmungsort** gelangen und dort ihre Wirkung **besser und schneller** entfalten können als bei systemischen Therapien – nahezu **ohne Wirkstoffverlust und unerwünschte Nebenwirkungen**

EFFEKTIVE INHALATIONSTHERAPIE FÜR PFERDE MIT ATEMWEGSEKRANKUNGEN



DIE DETAILS AUF EINEN BLICK

Das praxiserprobte und mit Veterinärmedizinern gemeinsam entwickelte Set verspricht alles, was für eine **schnelle** und **effektive Inhalationstherapie** notwendig ist.

Im Vergleich zu gängigen Inhalatoren liegt der **Unterschied** beim SaHoMa®-II Inhalationsset für Pferde **im Detail:**



Durchdachte Bauweise ohne Schläuche, Rohre und Kammern

Leichte und transparente Inhalationsmaske mit direkter Aerosoleinleitung für eine Inhalationstherapie nahezu ohne Kondensverluste




Smarte Verneblung auf Knopfdruck

Verschiedene Programme zur Auswahl des optimalen Verneblungsmodus für nahezu alle gängigen Inhalationslösungen



Optimale Passform und Dichtigkeit

Perfekt sitzende Dichtringe für alle Pferdenasen vermeiden Aerosolverluste und schmiegen sich hervorragend an

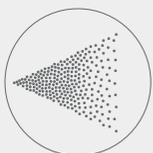

Mit Sicherheit durchatmen

Einzigartige Filtermembrane sorgen für eine stressfreie Inhalation ohne Panikreaktion und Augenweiten und verhindern die Verunreinigung der Umgebungsluft

Diese Besonderheiten machen das SaHoMa®-II Inhalationsset für Pferde zu **einem einzigartigen, unvergleichbaren Produkt, das die Gesundheit Ihres Pferdes unterstützen soll.**

Zusätzlich bietet es die nachfolgenden Vorteile:

Uneingeschränkte Mobilität

Kabelloser Betrieb durch integrierten Lithium-Polymer-Akku mit einer Akkulaufzeit von zwei Stunden sowie integrierter Ladestandanzeige und automatischer Abschaltfunktion

Wo, wann und wie es ihr Pferd am liebsten mag

Höchste Akzeptanz durch die Inhalation im Stall, beim Longieren oder während eines gemütlichen Spaziergangs ohne Stress und Panikreaktionen, auch dank geräuschloser Arbeitsweise

Kinderleichte Anwendung und Reinigung

Stressfreie Inhalation für Pferd und Reiter, die dank kinderleichter Anwendung und schneller, hygienischer Reinigung langfristig und ohne großen Aufwand von Zuhause aus durchführbar ist



Inhalation bei Wind und Wetter

Die aufschiebende Abdeckhaube schützt die Elektronikteile vor äußeren Einflüssen und Herausfallen oder Verrutschen und schont so den Geldbeutel

Modernste Mesh-Technologie

Optimale Partikelgrößen und exzellente Output-Werte, angepasst an den großen Atemtrakt der Pferde

Service und Kompetenz als Tüpfelchen auf dem i

Durch fachkundige und persönliche Betreuung und Beratung vor Ort und am Telefon garantieren wir den Rundum-Wohlfühl-Faktor und lassen Sie auch nach dem Kauf nicht im Stich



100 % Made in Germany

Wir suchen alle verwendeten Materialien mit viel Sorgfalt aus und verwenden nur bewährte und größtenteils biokompatible Stoffe aus der Humanmedizin, die wir für unsere Qualitätsprodukte von deutschen Lieferanten beziehen

TECHNISCHE DATEN

Das SaHoMa®-II Inhalationsset für Pferde ist ausgestattet mit **modernster und ausgereifter Technik, die Sie begeistern wird:**



260 x 250 x 322 mm, 1,45 kg Gesamtgewicht (in betriebsbereitem Zustand)



MMD: > 6 µm | FPF: < 50 %
Output: 0,5 ml - 2 ml pro Minute



Kontinuierlicher Modus mit Abschaltfunktion
Zeitprogramm zum Einstellen individueller Inhalationszeit
Integrierte Ladestandanzeige

